



Mini-Beacon für Navigil-Armbanduhren

Tagesabläufe lückenlos erfassen mit präziser Raumerkennung

- **Raumgenaue Anwesenheitserkennung**
- **Erweiterte Beacon-Abdeckung für das gesamte Gebäude**
- **Maximierte Batterielaufzeit der Armbanduhr**
- **Reduziertes Risiko falscher Home-Beacon-Alarme**
- **Einfache Peel-and-Stick-Installation**
- **Lange Batterielaufzeit**

Die Mini-Beacons sorgen für eine vollständige Abdeckung des Wohnbereichs, senken die Zahl falsch ausgelöster „außer Haus“-Alarme deutlich und schonen zudem die Batterie.

Einfache Installation

Die Mini-Beacons laufen mit einer Knopfzelle und werden per Klebefläche montiert, schnell installiert und sofort nutzbar.

Zuverlässige „außer Haus“-Alarme

Gerade bei Menschen mit Gedächtnisproblemen ist es wichtig zu wissen, ob sie sicher zu Hause sind. Mini-Beacons sorgen für eine stabile Signalabdeckung im gesamten Wohnbereich und reduzieren das Risiko falscher „außer Haus“-Alarme. Gleichzeitig tragen sie zur Verlängerung der Batterielaufzeit des Geräts bei, da der Stromverbrauch im Innenbereich optimiert wird.

Aktivitätsbericht

Veränderungen in den täglichen Routinen älterer Menschen können ein Hinweis darauf sein, dass eine genauere Beobachtung notwendig wird, um gesundheitlichen Abbau zu verhindern. Navigil-Armbanduhren erfassen und melden das Aktivitätsniveau über den Tag hinweg und zeigen den prozentualen Anteil sehr aktiver, aktiver und inaktiver Zeit.


Statistiken zu Alltagsroutinen

Änderungen im täglichen Verhalten lassen sich anhand von Berichten erkennen, die die Bewegungen des Nutzers zu Hause über den Tag hinweg zeigen. Mini-Beacons können in jedem Raum platziert werden, auch im Bad. Die Statistik zeigt den prozentualen Anteil der in den einzelnen Bereichen verbrachten Zeit. Diese Einblicke können frühzeitig auf Auffälligkeiten hinweisen, z. B. häufige Toilettenbesuche oder unregelmäßige Schlafmuster.

Die Statistiken werden zusammen mit anderen gerätegenerierten Daten übermittelt, um den Gesamtstromverbrauch der Armbanduhr niedrig zu halten. Die Detailtiefe der Berichterstattung kann im Navigil-Service angepasst werden. Aktivitäts- und Heimstatistiken können an andere Server weitergeleitet werden, um großangelegte Analysen einschließlich Data-Mining zu ermöglichen—etwa zur Identifikation von Personen, die möglicherweise frühzeitige Unterstützung benötigen, um gesundheitlichen Abbau oder eine beginnende Depression zu verhindern.

Mini-Beacon	Produktcode	NVGMBBA
	Kommunikation	BLE 4.0, class 2, 2.4 GHz
	Sendeintervall	700 ms
	Beacon-Abdeckung	Mehrere Beacons können im selben Raum installiert werden
	Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand	Meldung an den Server über die Navigil-Armbanduhr
	Bereichscodierung	Bis zu 6 Bereiche, typischerweise Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Toilette, Eingang
		Zusätzlicher Zonen-Code für verbotene Bereiche zur automatischen Alarmierung
	Typ	Batteriebetrieben
	Stromquelle	CR2477-Batterie, 3,0 V, 1000 mAh, vom Benutzer austauschbar
	Batterielaufzeit	Bis zu 24 Monate
	Reichweite	Bis zu 10 m
	Versionen	Schwarzes Gehäuse
	Abmessungen	43 s 43 x 14 mm
	Gewicht	23 g
	Spritzwassergeschützt	Spritzwassergeschützt
	Betrieb	Innenbereich, -20 °C bis +60 °C
	Installation	Peel-and-Stick-Klebeband (mitgeliefert)
		Bevorzugte Position: Deckenmitte des Raumes
	Zertifizierungen	CE, FCC, RoHS
	Verpackung	Bulk-Verpackung

At home

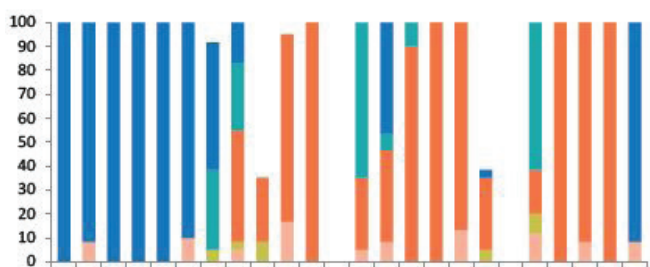

Wesentliche Merkmale:

- Einfache Installation
- Erweiterte Beacon-Abdeckung für das gesamte Gebäude zur Vermeidung falscher Heim-Alarme
- Innenraum-Platzierung
- Raumgenaue Heimstatistiken
- Lange Batterielaufzeit
- Spritzwassergeschützt
- Leicht austauschbare Batterie
- Optimierte Batterielaufzeit der Navigil-Armbanduhr

Nav Com Oy

Innopoli 3
Vaisialantie 2-8
02130 Espoo
Finnland

www.navigil.com